



Schnell



Genau

Simplitude™

ByMe™

Der einfache Selbsttest für ein
schnelles und genaues Testergebnis

HIV – Selbsttest



BV

Ein Test, eine Testflüssigkeit


Simplitude™ ByMe™ ist der erste All-in-One Selbsttest, um das Testen zu Hause einfacher zu machen.

Der Simplitude™ ByMe™ HIV-Schnelltest liefert ein schnelles und genaues Testergebnis.



Die Anwendung von Simplitude™ ByMe™

So einfach wie bis 3 zu zählen

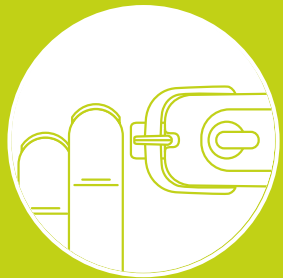

1 Blut entnehmen
am Finger



2 Füllen
des Blutentnahmeröhrchens



3 Transferieren
des Bluts zum Teststreifen
und Hinzufügen der Testflüssigkeit

Das Testergebnis verstehen



Eine Linie

Negatives Ergebnis

Wenn bei C eine Linie erscheint, ist
der Test HIV-negativ.

Es darf keine Linie bei T erscheinen.



Zwei Linien

Positives Ergebnis

Wenn zwei Linien erscheinen, auch wenn
diese schwach sind, ist der Test HIV-positiv.

Dies ist ein Screening-Test.

Wenden Sie sich zur weiteren Untersuchung
an einen Arzt oder eine Klinik.



Keine Linie

Das Ergebnis ist ungültig

Wenn bei C keine Linie erscheint,
hat der Test nicht funktioniert.

Ihre Gesundheit. Ihr Leben. Ihre Wahl.

Mit Simplitude™ ByMe™ können Sie einen HIV-Selbsttest bequem bei sich zu Hause durchführen.



Einfach

Mit der All-in-One Testplattform kann die Blutprobe gewonnen und entnommen werden. Der Test ist schnell und einfach in der Anwendung.



Schnell

Das Ergebnis kann nach nur 15 Minuten abgelesen werden.



Genau

Der Test ist zu 99,6 % genau.



Gesundheit im Griff

Sie entscheiden, wo, wann und wie oft Sie sich auf HIV testen.

Es gibt viele Gründe für einen HIV-Test:



Regelmäßige Tests sind Teil Ihrer Gesundheitsvorsorge



Sie haben mehrere Partner



Sie und Ihr Partner möchten sich sicher sein



Sie haben eine neue Beziehung



Das Kondom ist gerissen



Sie führen eine offene Beziehung



Sie hatten ungeschützten Sex

Mit Simplitude™ ByMe™ haben Sie Ihre Gesundheit im Griff



PZN 16517113 • UVP: 29,95 €

Seit mehr als 60 Jahren vertrauen die Menschen Owen Mumford darin, ihnen zuverlässige Medizinprodukte zur Verfügung zu stellen. Jetzt nutzt das Familienunternehmen sein Fachwissen, um Simplitude™ ByMe™ einzuführen und mit diesem Schnelltest allen den Zugang zu einer innovativen Technologie zu ermöglichen, die medizinische Fachkräfte im Point-of-Care bereits verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter [simplitudebyme.com](https://www.simplitudebyme.com)



2797

© Copyright Owen Mumford 2020
BYME-INFOAID/DE/MCC/KB/0420/01